hidrolight



A vida em Movimento.



EVOLUÍMOS PARA CUIDAR MELHOR DE VOCÊ

Conheça o Neoprene: **Stretch Plush Loop!**

- + CONFORTO
- + FLEXIBILIDADE
- + MACIEZ




Neoprene com elasticidade e facilidade no fechamento com o velcro, sendo o **Stretch Loop** mais versátil para ajustes precisos em produtos ortopédicos e esportivos.





TABELA DE MEDIDAS

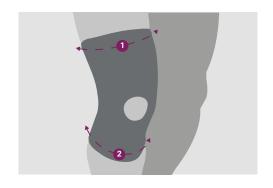

Joelheira Articulada Ajustável

Joelheira Ajustável com Hastes de Aço Flexíveis

Joelheira Relieve

ÚNICO

1 COXA - 42 ATÉ 60 CM

2 PANTURRILHA - 40 ATÉ 47 CM

ÚNICO

1 COXA - 44 ATÉ 52 CM

2 PANTURRILHA - 38 ATÉ 42 CM

AJUSTÁVEL

1 - COXA
37 ATÉ 49 CM


2 - PERNA
32 ATÉ 40 CM

ESPECIAL

1 - COXA
50 ATÉ 60 CM
41 ATÉ 50 CM

12CM ACIMA DO JOELHO

12CM ABAIXO DO JOELHO

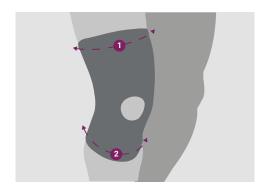

Joelheira Articulada com Cintas Cruzadas Joelheira Articulada

PP	1 - DE 39 A 43 CM	2 - DE 29 A 34 CM
P	1 - DE 43 A 48 CM	2 - DE 32 A 38 CM
М	1 - DE 48 A 56 CM	2 - DE 34 A 42 CM
G	1 - DE 56 A 65CM	2 - DE 38 A 46 CM
GG	1 - DE 65 A 70 CM	2 - DE 42 A 48 CM

	ARTICULADA COM CINTAS CRUZADAS	ARTICULADA Ajustável	ARTICULADA	RELIEVE	AJUSTÁVEL COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS
NÍVEL	4	4	4	3	3
INDICAÇÕES GERAIS	Ø	•	•	Ø	•
INSTABILIDADE E LUXAÇÃO PATELAR	Ø	•	•	Ø	-
INSTABILIDADE ROTATÓRIA	Ø	•	•	-	-
GRADUAÇÃO DE COMPRESSÃO	Ø	•	-	O	•
REFORÇO NA FUNÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	Ø	-	-	-	-





Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

JOELHEIRA

OR82 AJUSTÁVEL OR82_E ESPECIAL

Possui ajuste patelar de 4 pontas auxiliando na compressão e posicionamento na região da patela, com orificio patelar oval é mais anatômico e acomoda um tubo interno emborrachado para aumentar o alívio da tensão no tendão patelar. As 4 barbatanas flexíveis (2 de cada lado) estabilizam sem restringir os movimentos. E o velcro elástico em torno da coxa e da panturrilha oferecem compressão extra e auxiliam na fixação da peça.

TAMANHO

AJUSTÁVEL

ESPECIAL

Notificação ANVISA: 80758210031



Nível 3- Prevenção e recuperação de lesões graves

OR59

Joelheira Ajustável com Hastes de Aço Flexíveis

A função Ajustável permite que o usuário utilize a órtese por mais tempo à medida que o tratamento evolui e o edema diminui, podendo ajustar a compressão através das abas traseiras. E as hastes laterais aumentam a estabilidade da articulação oferecendo mais segurança nos movimentos.

Tamanho

ÚNICO



Joelheira Articulada

As articulações em nylon rígido com trava estabilizam a lateralização e hiperextensão do joelho, evitando a instabilidade rotatória enquanto as faixas superior e inferior aumentam a compressão conforme ajuste.

Tamanhos











Cadastro ANVISA: 80758210001



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR60

Joelheira Articulada com Cintas Cruzadas

Além das duas articulações laterais que estabilizam a lateralização e hiperextensão do joelho, possui reforço na função do ligamento cruzado através das Cintas Cruzadas dando ainda mais estabilidade e segurança.

Tamanhos











Cadastro ANVISA: 80758210001



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR70


Joelheira Articulada Ajustável

A função Ajustável proporciona a graduação da compressão à medida que o edema da lesão vai diminuindo, oferecendo liberdade de ajuste ao usuário. E as articulações laterais estabilizam a lateralização e hiperextensão do joelho.

Tamanho




TABELA DE MEDIDAS

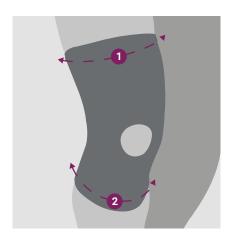







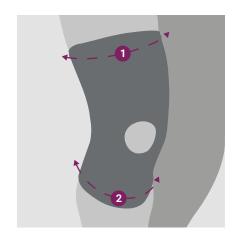

Joelheira Lisa Longa / Joelheira com Reforço Patelar Longa / Joelheira com Orifício

PP	1 - DE 33 A 39CM	2 - DE 27 A 33CM
P	1 - DE 39 A 46CM	2 - DE 33 A 38CM
М	1 - DE 46 A 52CM	2 - DE 38 A 40CM
G	1 - DE 52 A 55CM	2 - DE 40 A 45CM
GG	1 - DE 55 A 58CM	2 - DE 45 A 47CM

	REFORÇO PATELAR AJUSTÁVEL	REFORÇO PATELAR LONGA	COM ORIFÍCIO	LISA Longa
NÍVEL	2	2	1	1
INDICAÇÕES GERAIS	•	•	©	•
ALÍVIO DA PRESSÃO SOBRE A PATELA	•	•	©	CONTRAINDICADA
CONDROMALÁCIA PATELAR	•	•	©	-
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	•	-	-	-



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Joelheira Com Reforço Patelar Ajustável

Oferece alívio da pressão sobre o tendão patelar e ajuste da compressão conforme necessidade do usuário e facilidade de vestir.

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR41 - LONGA

Joelheira Com Reforço Patelar

Melhora a sensação de estabilidade da articulação e auxilia na prevenção de lesões podendo ser utilizada durante a prática de atividades físicas.

Tamanhos

















Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR64

Joelheira Com Orifício

Proporciona mais segurança ao usuário que já teve lesões no joelho e alivia a tensão sobre o tendão patelar através do orifício patelar.

Tamanho











Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR42 - LONGA

Joelheira Lisa

Utilizada por pessoas que procuram mais segurança, aumentando a estabilidade de forma leve e também para absorver impactos em atividades físicas.

Tamanho













IMOBILIZADOR DE JOELHO

Comfort: Air®


OR1060 Estreito | OR1061 Largo


Desenvolvido para imobilizar parcial ou totalmente, conforme orientação médica, com a facilidade de reajustar a imobilização do produto à medida que o edema do paciente reduz.

Por conta da praticidade e higiene, pode substituir o gesso, oferecendo muito mais conforto durante o tratamento e recuperação da lesão. Desenhado conforme a anatomia do corpo, promove a imobilização da articulação com segurança.





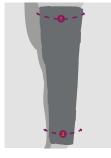

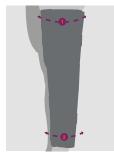

	ESTREITO
40 CM	1 49 A 60 CM 2 32 A 40 CM
50 CM	1 49 A 60 CM 2 32 A 40 CM
60 CM	1 52 A 60 CM 2 34 A 44 CM
70 CM	1 52 A 60 CM 2 34 A 44 CM


	~ • - *
	TAMANHO LARGO
40 CM	1 60 A 74 CM
40	2 40 A 52 CM
50 CM	1 60 A 74 CM
20	2 40 A 52 CM
60 CM	1 60 A 74 CM
09	2 40 A 52 CM
CM	1 60 A 74 CM


2 | 40 A 52 CM

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Joelheiras

A Joelheira e Faixa Sub Patelar possuem um suporte em tubo na parte interna abaixo da rótula do joelho que promove alívio da dor que a síndrome de Osgood-Schlatter provoca.

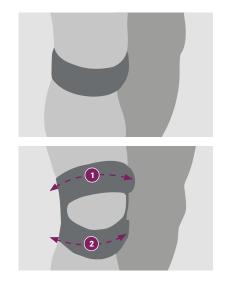

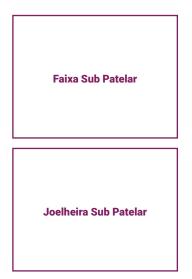

AJUSTÁVEL	43 X 4,5CM
AJUSTÁVEL	1 - DE 36 A 42 CM
	2 - DE 32 A 38 CM

	JOELHEIRA SUB PATELAR	FAIXA SUB PATELAR
NÍVEL	2	2
INDICAÇÕES GERAIS	•	•
USO NA PRÁTICA ESPORTIVA	•	•
ALÍVIO DA TENSÃO NO TENDÃO PATELAR	•	•
SÍNDROME DE OSGOOD SCHLATTER	•	•
MELHORA A ESTABILIDADE	•	-







Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Joelheira Sub Patelar

Utilizada por pessoas que procuram mais segurança, aumentando a estabilidade de forma leve e também para absorver impactos em atividades físicas.

Tamanho

ÚNICO



OR69

Faixa Sub Patelar

Proporciona mais segurança ao usuário que já teve lesões no joelho e alivia a tensão sobre o tendão patelar através do suporte em tubo.

Tamanho

ÚNICO




BOTA PNEUMÁTICA

SAFE MOVE

OR1071 | OR1071_2 | OR1071_3 LONGA

AGORA COM 2 NOVOS TAMANHOS!



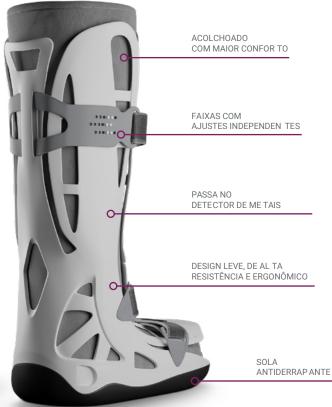



Sistema de ar que gera compressão reduzindo edemas, além de aumentar a proteção e estabilidade.

Controla individualmente o enchimento das câmaras direita e esquerda.

Tamanho







Cadastro ANVISA: 80758210090

MEDIDAS	P	M	G	
1 ALTURA DO PRODUTO	40cm	43cm	43cm	
2 ALTURA DO CALCANHAR	4cm	4cm	4cm	
3 LARGURA DO PRODUTO	12cm	14cm	15cm	
4 COMPRIMENTO DO PRODUTO	28cm	30cm	33cm	
5 COMPRIMENTO DA PALMILHA	25cm	28,5cm	31cm	
6 CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA DO USUÁRIO	34 a 42cm	38 a 46cm	42 a 50cm	
7 TAMANHO DO PÉ DO USUÁRIO	n°34 até n°37	n°38 até n°42	n°43 até n°46	
8 PESO SUPORTADO	130KG	150KG	150KG	375


MAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Botas

12 meses de muito estudo e testes trouxeram para o portfólio da Hidrolight uma bota leve, anatômica de verdade, que realmente imobiliza, segura e confortável além de muito mais agradável visualmente, ou seja, eficiente e autêntica.





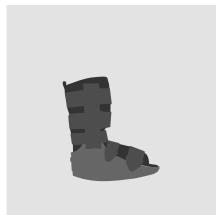



Bota	Imobil	izadora	Comfort	Longa

	Р	М	G		
NÚMERO	33 A 36	37 A 42	43 A 46		
PESO APROX. (EM GRAMAS)	823	925	1021		
*ALTURA DE 41CM PARA TODOS OS TAMANHOS.					

Bota Imobilizadora Comfort Curta

	Р	M	G		
NÚMERO	33 A 36	37 A 42	43 A 46		
PESO APROX. (EM GRAMAS)	730	815	925		
*ALTURA DE 32CM PARA TODOS OS TAMANHOS.					

Bota Imobilizadora Comfort Infantil

	P/M	G
NÚMERO	22 A 26	27 A 33
PESO APROX. (EM GRAMAS)	526	581
*ALTURA	27	30

* Altura medida do topo da haste até o chão.

Indicações Gerais

Imobilização do pé e tornozelo em casos de fraturas, luxações, entorses, contusões, distensões, lesões de ligamentos e tendões, prevenção e tratamento na artrite reumatoide, substituição do gesso, pós-operatório, entre outros.







Bota Imobilizadora Standard Longa

	Р	М	G
NÚMERO	33 A 36	37 A 42	43 A 46
PESO APROX. (EM GRAMAS)	824	942	1108

*ALTURA DE 37CM PARA TODOS OS TAMANHOS.


Bota Imobilizadora Standard Curta

	Р	М	G
NÚMERO	33 A 36	37 A 42	43 A 46
PESO APROX. (EM GRAMAS)	764	869	1015

*ALTURA DE 31CM PARA TODOS OS TAMANHOS.

* Altura medida do topo da haste até o chão.



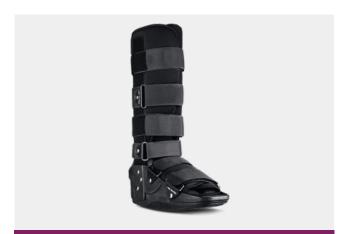

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1030 - LONGA

Bota Imobilizadora Comfort

Tamanhos

P - N° 33 A 36 M - N° 37 A 42 G - N° 43 A 46



OR1031 - CURTA

Bota Imobilizadora Comfort

Tamanhos

P - N° 33 A 36

M - N° 37 A 42 G - N° 43 A 46



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Bota Imobilizadora Infantil

Tamanhos

P/M - N° 22 A 26

G - N° 27 A 33

Cadastro ANVISA: 80758210021



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1038 - LONGA

Bota Imobilizadora Standard

Tamanhos

P - N° 33 A 36 M - N° 37A 42

G - N° 43 A 46

Cadastro ANVISA: 80758210026



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1039 - CURTA

Bota Imobilizadora Standard

Tamanhos

P - N° 33 A 36 M - N° 37 A 42 G - N° 43 A 46

LANÇAMENTO!

Kit de Cunhas Tendão de Aquiles

OR1015

O Kit de Cunhas Tendão de Aquiles é um acessório indicado para o pós-operatório e/ou tratamento conservador de afecções que exigem a elevação do calcanhar para alívio da tensão no tendão calcâneo, como inflamações/tendinites e estiramentos/rupturas do tendão. É indicado para uso apenas com as botas imobilizadoras Hidrolight (modelos Standard e Comfort). Com 4 níveis de regulagem.

O tempo de permanência deve ser determinado de acordo com a avaliação e indicação médica.

Local específico de utilização: Dentro da Bota Imobilizadora Hidrolight, embaixo do calcanhar. Produto não invasivo.



MEDIDAS:





Calçado - or1044 Bacouk



O Calçado Barouk Hidrolight foi desenvolvido para ser uma peça leve, confortável, resistente e elegante, sem aparência de doença, para a recuperação pós-cirúrgica ou que necessite evitar a descarga de peso no antepé.

Indicado para pós-operatório de cirurgias do antepé, cirurgias de joanete (hallux valgus), osteotomia, fraturas e lesões nos dedos e metatarsos ou qualquer situação que necessite evitar a descarga de peso no antepé.

Cadastro ANVISA: 80758210035



TAMANHO

N° 33 - 36 (24,5 cm*)

Р

N° 37 - 40 (26,5 cm*)

М

N° 41 - 44 (30 cm*)

G

* Medida aproximada interna do solado (Onde é calcado o pé)


PÓS-OPERATÓRIO








TABELA DE MEDIDAS

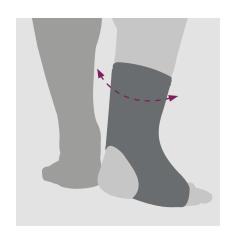

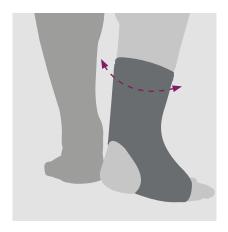



Estabilizador de Tornozelo		
PP	DE 20 A 22CM	
Р	DE 22 A 26CM	
М	DE 26 A 29CM	
G	DE 29 A 31CM	
GG	DE 31 A 33CM	
Medida 4 dedos acima tornozelo.		

Tornozeleira com Zíper Tornozeleira Longa		
PP	DE 20 A 22CM	
Р	DE 22 A 24CM	
М	DE 24 A 26CM	
G	DE 26 A 28CM	
GG	DE 28 A 30CM	

Tornozeleira Ajustável		
ÚNICO	TORNOZELO 20 A 33CM	PALMA DO PÉ 20 A 30CM
ESPECIAL	TORNOZELO 33 A 43CM	PALMA DO PÉ 25 A 35CM

	ESTABILIZADOR DE TORNOZELO	TORNOZELEIRA Ajustável	TORNOZELEIRA COM ZÍPER	TORNOZELEIRA LONGA
NÍVEL	3	2	1	1
INDICAÇÕES GERAIS	•	•	•	•
INSTABILIDADE ARTICULAR	•	•	•	•
LUXAÇÃO	•	•	-	-
GRADUAÇÃO DE COMPRESSÃO	•	•	-	-
RESTRIÇÃO DA LATERALIZAÇÃO DO TORNOZELO	•	-	-	-
PREVENÇÃO DE DEFORMIDADES NA ARTRITE REUMATOIDE	•	-	-	-
TALAS LATERAIS SEMI RÍGIDAS (PROTEÇÃO E CONFORTO)	•	-	-	-



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Estabilizador de Tornozelo

Limita a lateralização dos movimentos do tornozelo aumentando ainda mais a estabilidade da articulação.

Tamanhos











Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR46D

Tornozeleira com Zíper

A mesma compressão e segurança, mas com mais facilidade na colocação por conta do zíper na parte superior do produto.

Tamanhos











Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR46C - ÚNICO | OR46C_2 - ESPECIAL

Tornozeleira Ajustável

Aumenta a possibilidade de compressão através das faixas ajustáveis, proporcionando o nível de estabilidade desejado.

Tamanho





Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR46 - LONGA

Tornozeleira

Aumentam a estabilidade da articulação para mais segurança e conforto durante as atividades diárias ou prática esportiva.

Tamanhos











STRONG ankle

IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

É um Imobilizador de Tornozelo de alto padrão e alto poder de estabilização. Apesar da firmeza que proporciona para a articulação do tornozelo, ainda assim é muito confortável porque sua tala inteira é revestida com uma espuma e tecido suave ao toque.

Cadastro ANVISA: 80758210042



Medida 4 dedos acima tornozelo.









Suporte de Compressão para Panturrilha

Tamanhos









OR71 Suporte para Panturrilha

Prevenção e tratamento de lesões, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, contusões, distensões, melhora da circulação sanguínea, síndrome do estresse tibial medial (canelite), auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos











Cadastro ANVISA: 80758210002

Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões



PP	DE 32 A 34 CM
P	DE 34 A 37 CM
М	DE 37 A 40 CM
G	DE 40 A 44 CM
GG	DE 44 A 48 CM



Suporte para Ombro

Alívio de dores agudas e crônicas, bursite, tendinite, artrite, luxação, distensão, estresse muscular, sequelas de A.V.E. (Acidente Vascular Encefálico), capsulite adesiva, fratura de clavícula, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos












Cadastro ANVISA: 80758210002

Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

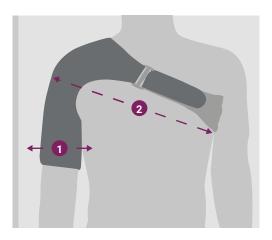

PP	1 - DE 22 A 28CM	2 - DE 70 A 95CM
Р	1 - DE 24 A 32CM	2 - DE 70 A 100CM
М	1 - DE 26 A 34CM	2 - DE 84 A 110CM
G	1 - DE 28 A 36CM	2 - DE 90 A 120CM
GG	1 - DE 31 A 38CM	2 - DE 104 A 140CM



ESTABILIZADOR DE OMBRO NEO

O Estabilizador de Ombro Hidrolight oferece um ajuste total do produto no ombro, estabilizando a articulação local. O ajuste é pontual no bíceps, no peito e nas costas. Ainda oferece um reforço duplo posicionado no ombro. Por ser de neoprene, isola a temperatura e auxilia no alívio das dores locais.

Cadastro ANVISA: 80758210049




AJUSTE NO BÍCEPS



AJUSTE NO PEITO E NAS COSTAS



REFORÇO DUPLO

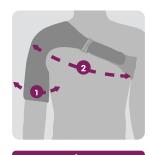

1 - CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO

2 - CIRCUNFERÊNCIA DO TORÁX

DD	1 - DE 22 ATÉ 28 CM
PP	2 - DE 70 ATÉ 95 CM

1 - DE 24 ATÉ 32 CM 2 - DE 70 ATÉ 100CM

1 - DE 26 ATÉ 34 CM 2 - DE 84 ATÉ 110 CM

1 - DE 28 ATÉ 36 CM

2 - DE 90 ATÉ 120 CM

1 - DE 31 ATÉ 38 CM
2 - DE 104 ATÉ 140 CM



Coxais O Coxal Hidrolight promove compressão sobre a coxa auxiliando no alívio da dor e recuperação muscular além de prevenir novas lesões da região.



OR44

Coxal Liso

Comprime a região da coxa auxiliando no alívio da dor.

Tamanhos









GG

Cadastro ANVISA: 80758210002



OR45


Coxal Ajustável

Oferece compressão ajustável da região da coxa sendo também mais prática de ser vestida


Tamanho




TABELA DE MEDIDAS

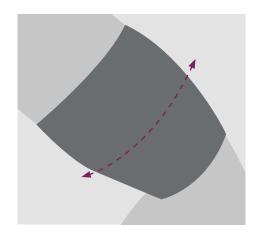



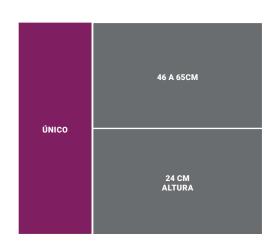

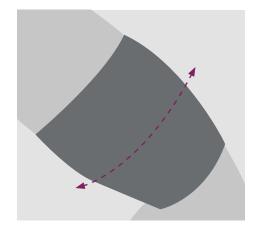




PP	1 - DE 43 A 53CM
Р	1 - DE 53 A 60CM
М	1 - DE 60 A 64CM
G	1 - DE 64 A 70CM
GG	1 - DE 70 A 75CM

	COXAL AJUSTÁVEL	COXAL LISO
NÍVEL	2	1
INDICAÇÕES GERAIS	•	⊘
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	•	-



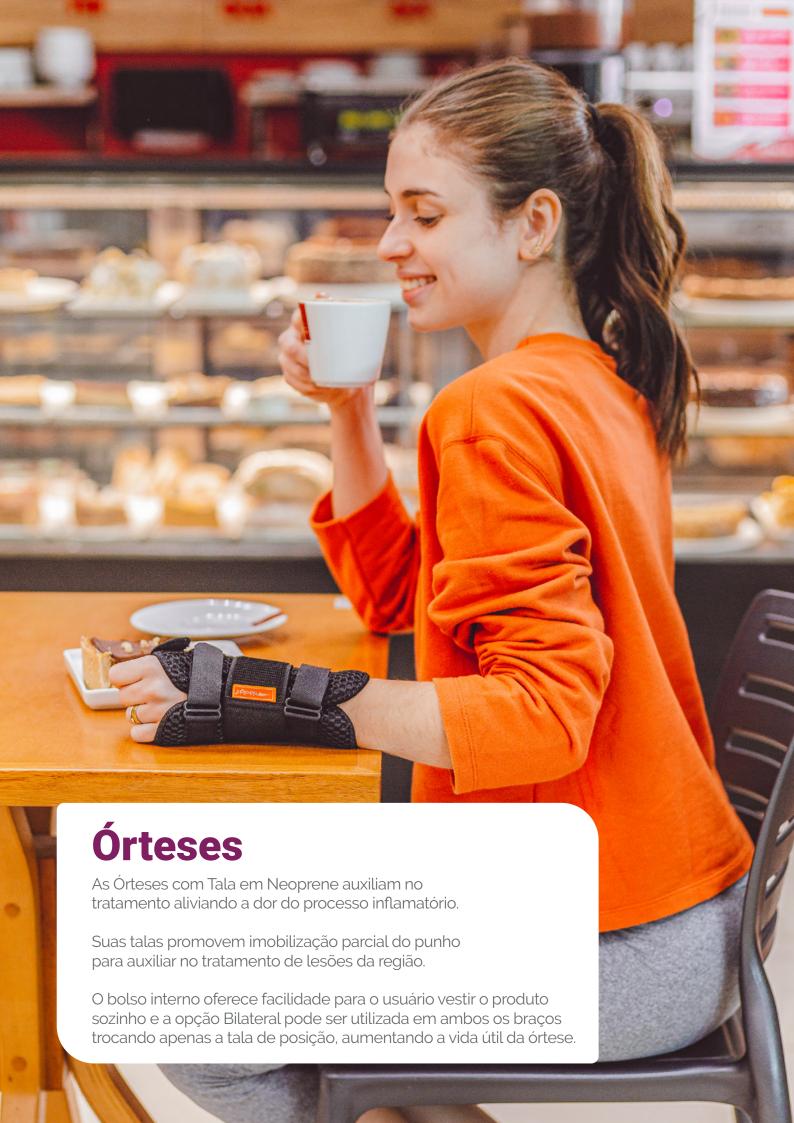

OR1065 Com Polegar OR1066 Sem Polegar

Órtese Soft

A Órtese Soft Curta é confeccionada com uma espuma no seu interior revestida com um tecido de algodão com toque macio. O bolso interno auxilia no ajuste do produto para que o paciente possa vesti-lo sozinho.

Cadastro ANVISA: 80758210046



Sem Polegar



Circunferência

P DE 14 ATÉ 17 CM

M DE 17 ATÉ 20 CM

G DE 20 ATÉ 23 CM

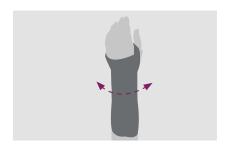


TABELA DE MEDIDAS



Órtese Comfort Air Longa com Polegar

P	14CM ATÉ 17CM
М	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM



Órtese Comfort Air Longa sem Polegar

P	14CM ATÉ 17CM
М	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM



Órtese Comfort Air com Polegar

Р	14CM ATÉ 17CM
М	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM



Órtese Comfort Air sem Polegar

P	14CM ATÉ 17CM
М	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM
GG	23CM ATÉ 26CM

	AIR COM POLEGAR	AIR LONGA COM POLEGAR	PLUS COM POLEGAR	AIR LONGA	AIR SEM POLEGAR	PLUS SEM POLEGAR
NÍVEL	4	4	4	4	3	3
INDICAÇÕES GERAIS	O	•	②	•	Ø	•
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO	•	•	•	•	•	•
RIZARTROSE E SÍNDROME DE QUERVAIN	O	•	•	-	-	-
CONTUSÃO E LUXAÇÃO DO POLEGAR	O	•	•	-	-	-



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1022B ESQUERDA | OR1022 DIREITA

Ortese

Comfort Air®

Projetada para dar conforto durante o tratamento, é confeccionada em tecido respirável com um bolso interno que facilita o ajuste do paciente, permitindo a colocação inclusive sozinho. Possui uma tala em alumínio na parte superior e uma tala em nylon rígido na parte inferior do produto, que vai desde o polegar, sendo esse seu maior diferencial, auxiliando na imobilização e alinhamento. Conta também com um ajuste no polegar, que evita o garrote no dedo, permitindo a circulação e aumentando a imobilização e alinhamento. Proporciona ainda mais estabilidade com a faixa elástica que fica posicionada em cima da articulação do punho, aumentando a imobilização.

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210018



OR1026B ESQUERDA | OR1026 DIREITA



Órtese

Comfort: Air SEM POLEGAR

Produzida em tecido respirável para maior conforto térmico do usuário, possui um bolso interno que facilita o ajuste da órtese. Conta com uma tala em alumínio na parte superior do produto e outra em nylon rígido com curvatura anatômica na parte inferior da órtese, ambas trabalhando juntamente com as fi tas aderentes para a imobilização parcial e alinhamento da articulação. Proporciona ainda mais estabilidade com a faixa elástica que fica posicionada em cima da articulação do punho, aumentando a imobilização e alinhamento.

Tamanhos













Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1028B ESQUERDA | OR1028 DIREITA

Ortese longaComfort: Air SEM POLEGAR

É confeccionada em tecido respirável, um tecido que proporciona mais conforto térmico por permitir a respiração da pele. Possui bolso interno que facilita a colocação do produto, possibilitando ainda que o usuário vista a peça sem precisar de ajuda. Dispõe de 4 fitas com fecho aderente para ajuste específi co da compressão e mais uma faixa elástica com fixadores espaçados - para o elástico não perder a tração, logo acima do punho, para aumentar a estabilidade da articulação. Contém ainda uma tala em nylon rígido com curvatura anatômica que vai do polegar ao antebraço do paciente para maior segurança e imobilização parcial e alinhamento da articulação, favorecendo ainda no tratamento de Síndrome do Túnel do Carpo.

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210018



OR1024

no pós-operatório

Ortese longa Comfort Air COM POLEGAR

É confeccionado em tecido respirável, proporcionando conforto térmico. Possui bolso interno que facilita a colocação do produto, possibilitando ainda que o usuário vista a peça sem precisar de ajuda. Dispõe de 3 fitas com fecho aderente para ajuste específico da compressão e mais um fecho aderente elástico que contorna o punho bem em cima da articulação, para aumentar a estabilidade. Sua tala rígida abrange o dedo polegar até o antebraço com curvatura anatômica, para maior segurança, imobilização parcial e alinhamento da articulação, favorecendo ainda no tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo.

Tamanhos







TABELA DE MEDIDAS




Órtese Splint Bilateral

ÚNICO	DE 13 A 21CM
ESPECIAL	DE 22 A 26CM

-				
Ortese	de	Polegar	LF.	ΔΝ

Р	DE 12CM A 16CM
М	DE 16CM A 20CM
G	DE 20CM A 24CM
Circunferência de punho	

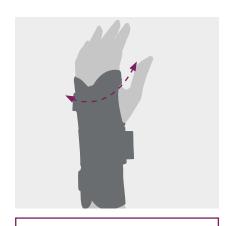

Órtese Comfort Neoprene

PP/P	DE 18 A 23CM
М	DE 23 A 26CM
G/GG	DE 25 A 28CM
-	

Circunferência da palma da mão.

	ÓRTESE SPLINT BILATERAL	ÓRTESE COMFORT NEOPRENE
NÍVEL	3	3
INDICAÇÕES GERAIS	②	•
BOLSO INTERNO	•	•





Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

OR1012

Órtese de Polegar LEAN®

desenvolvido para estabilizar e alinhar o dedo Polegar e por ser em neoprene, que é isolante térmico, auxilia e acelera o processo de cicatrização da lesão. Possui suporte interno para facilitar a colocação do produto. A tala imobilizadora contempla desde o polegar ao punho para aumentar a imobilização.

Cadastro ANVISA: 80758210040

Tamanhos







DIREITA/ESQUERDA

ÓRTESE

SPLINT BILATERAL

OR83 ÚNICO | OR83_E ESPECIAL

A Órtese Splint Bilateral Hidrolight é confeccionada em neoprene Plush, que possui as propriedades isolante térmicas com a elegância do acabamento em plush. Que tem por adicional a amplitude de ajuste, uma vez que o próprio tecido oferece aderência. As talas internas são facilmente ajustadas para a mão desejada. São 2 talas removíveis, uma com a curvatura ideal para a sustentação do punho à palma da mão e a segunda reta na parte dorsal do punho, evitando o movimento para cima e para baixo.

Cadastro ANVISA: 80758210034

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL







OR74B ESQUERDA | OR74 DIREITA

Órtese Comfort Neoprene

Possui duas tiras e uma faixa em elástico central para aumentar a possibilidade de compressão e a estabilidade da articulação. Possui também uma tala em nylon rígido anatômica na parte de baixo e uma haste flexível na parte superior do produto. Seu bolso interno facilita o ajuste do produto e por ser em neoprene que oferece isolamento térmico, auxilia no alívio da dor.

Tamanhos





G/GG

TALA OR1052 IMOBILIZADORA PARA DEDOS

Produto desenvolvido para estabilização e/ou imobilização dos dedos da mão. Possui tala em alumínio moldável e tiras de fixação que podem ser ajustadas conforme o tamanho da mão e/ou tipo de imobilização, seja de um dedo, dois ou até três dedos juntos. Após o ajuste confortável, as sobras das tiras podem ser cortadas com uma tesoura.

ANVISA

NOTIFICAÇÃO: 80758210047

TAMANHO ÚNICO









OR1053

IMOBILIZADOR DE DEDO



Revestido em Espuma

ANVISA

NOTIFICAÇÃO: 80758210047

Produtos desenvolvidos para casos de luxação e subluxação, fraturas, entorses e outros casos que requerem estabilização.

TAMANHOS: P - M - G

OR1054

IMOBILIZADOR DUPLO DE DEDO



TABELA DE MEDIDAS







Munhequeira Bumerangue	
ÚNICO	13CM A 28CM DE CIRCUNFERÊNCIA

Munhequeira Ajustável	
ÚNICO	35CM DE COMPRIMENTO
	11CM DE ALTURA
ESPECIAL	45CM DE COMPRIMENTO
	11CM DE ALTURA

Protetor para Punho		
ÚNICO	13CM A 28CM DE CIRCUNFERÊNCIA	
ESPECIAL	28CM A 38CM DE CIRCUNFERÊNCIA	

	MUNHEQUEIRA BUMERANGUE	MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL	PROTETOR PARA PUNHO
NÍVEL	2	2	1
INDICAÇÕES GERAIS	•	•	•
ESTABILIZAÇÃO PARCIAL DO PUNHO	•	•	-



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR47

Protetor Para Punho

Oferece mais segurança nas atividades diárias, auxiliando na estabilidade prevenindo lesões.

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002





Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR51

Munhequeira **Bumerangue**

Melhora a sensação de estabilidade da região. Seu diferencial é a possibilidade de dar duas voltas em torno da articulação do punho.

Tamanho

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR50

Munhequeira **Ajustável**

É de fácil ajuste e compressão, auxiliando no alívio da dor e na prevenção de lesões.


Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL




TABELA DE MEDIDAS

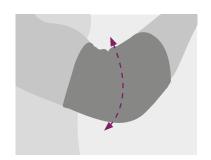




PP	DE 22 A 24CM	G	DE 28 A 32CM
Р	DE 24 A 26CM	GG	DE 32 A 35CM
М	DE 26 A 28CM		

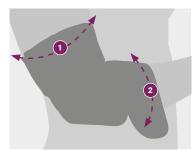




ámaa	1 - DE 25 A 38CM		1 - DE 39 A 44CM
ÚNICO	2 - DE 24 A 36 CM	ESPECIAL	2 - DE 37 A 42CM

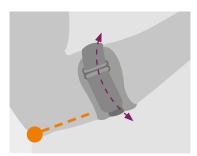



	22,5 ATÉ 31,5CM
ÚNICO	CIRCUNFERÊNCIA DO ANTEBRAÇO
	MEDIR A PARTIR DE 5CM DA PONTA DO COTOVELO



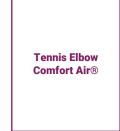

4	20CM A 37CM
ÚNICO	CIRCUNFERÊNCIA DA REGIÃO DO ANTEBRAÇO

	COTOVELEIRA AJUSTÁVEL	COTOVELEIRA LISA	TENNIS ELBOW AJUSTÁVEL COMFORT AIR
NÍVEL	1	1	1
INDICAÇÕES GERAIS	•	•	⊘
COMPRESSÃO EM TORNO DA ARTICULA- ÇÃO	•	•	-
DISTENSÕES E CONTUSÕES	•	•	-
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	•	-	Ø
DISCO DE TPE INTERNO	-	-	⊘



OR43 ÚNICO | OR43_E ESPECIAL

Cotoveleira Ajustável

Possui bolso interno para facilitar o ajuste, alças que graduam a compressão e isolamento térmico através do neoprene que auxilia no alívio da dor.

Tamanhos



ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002



OR43B

Cotoveleira Lisa

Desenvolvida para oferecer mais segurança e estabilidade ao usuário, prevenindo lesões, bem como auxílio do alívio da dor.

Tamanhos











Cadastro ANVISA: 80758210002



Tennis Elbow - OR89 Comfort: Air

Desenvolvido para promover apoio compressivo na região lesionada através de um coxim em silicone. Seu tecido é respirável proporcionando maior conforto térmico e seu acabamento dá mais conforto ao usuário.

Tamanho

ÚNICO / AJUSTÁVEL

Cadastro ANVISA: 80758210039



OR55

Tennis Elbow Ajustável

De fácil ajuste, possui disco interno que auxilia no alívio da dor nos tendões que passam pelos epicôndilos lateral e/ou medial.

Tamanho

ÚNICO

BOLSA TÉRMICA GEL

BT100 | BT101

A Bolsa Térmica Gel Hidrolight® auxilia nos tratamentos e alívio de dores, podendo ser aquecida ou resfriada não congelando mesmo quando submetida a baixas temperaturas do freezer/congelador. É reutilizável. e contém gel não tóxico.

Tamanho: (Comprimento x Altura)

200g - 180 x 130 mm 400g - 260 x 155 mm



NÃO CONGELA

VAI AO



SE MOLDA AO CORPO



NÃO TÓXICA



REUTILIZÁVEL

MICRO-ONDAS




MAIOR ALÍVIO





Suporte para Bolsa

Os Suportes para Bolsa auxiliam na aplicação das terapias de frio e calor permitindo que o usuário se locomova ou realize suas atividades tendo a bolsa terapêutica aplicada no local sem precisar usar suas mãos.

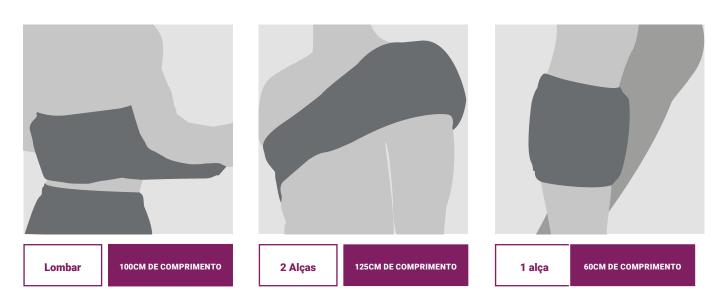

Indicações Gerais

Suporte e compressão no local da dor. Auxílio no tratamento fisioterapêutico; Manutenção da temperatura da bolsa térmica por mais tempo; Facilidade na aplicação da terapia térmica, permitindo ao usuário realizar suas atividades diárias ao mesmo tempo em que trata sua dor.

Calor: contraturas musculares e lesões crônicas; Relaxamento muscular.

Frio: hematomas, inflamações, contusões, edemas e lesões agudas;

Utilizável com sacola de gelo, bolsa de gel ou grãos;





OR67

Suporte para Bolsa de Gel Lombar

Bolsa térmica com manutenção prolongada da temperatura com design otimizado para a região do ombro e auxilia no tratamento fisioterapêutico.

Tamanho

100CM

Cadastro ANVISA: 80758210002



OR66 SEM BOLSA | OR66_2 COM BOLSA

Suporte para Bolsa de Gel 2 Alças

Bolsa térmica com manutenção prolongada da temperatura, ideal para membros superiores e inferiores. Design otimizado para a região do ombro e auxilia no tratamento fisioterapêutico.

Tamanho

120CM

Cadastro ANVISA: 80758210002



OR65 SEM BOLSA | OR65_2 COM BOLSA

Suporte para Bolsa de Gel 1 Alça

Bolsa térmica com manutenção prolongada da temperatura, ideal para membros superiores e inferiores e auxilia no tratamento fisioterapêutico.

Tamanho

60CM

Colete Jewett

OR1402

Utilizado para fraturas por compressão estáveis abaixo de T6, exceto em casos de osteoporose. Indicado no pós-operatório de fraturas, tumores e metástases nos corpos vertebrais.

Usado para imobilização após a estabilização cirúrgica de fraturas toracolombares.

Adequado no pós-operatório de hérnia de disco e para dores vertebrais causadas por metástases. Indicado para espondiloartrose.

Composto de alumínio, poliuretano, poliéster, polietileno, poliamida, polipropileno, poliacetal e aço.

Tamanho: (Circunf. Pélvica x Comprimento Tronco)

P - 60 até 75 x 39 até 36 cm

M - 75 até 90 x 42 até 49 cm

G - 90 até 105 x 45 até 52 cm

GG - 105 até 115 x 49 até 56 cm





MAIOR ESTABILIDADE VERTEBRAL



ACOLCHOADOS COM MATERIAL RESPIRÁVEL



BARRAS AJUSTÁVEIS PARA MELHOR ADAPTAÇÃO



Coletes Putti

Os Coletes Putti Hidrolight proporcionam estabilidade da coluna lombossacra, possuem hastes flexíveis que promovem mais conforto, além de poder ser ajustado conforme a sua necessidade.



Indicações Gerais

Traumatismo, fratura, contratura, artrose, hérnia, lesão medular, lesão nos discos intervertebrais, pós-operatório, espondilolise e espondilolistese.

Alto: Auxílio no tratamento de patologias da coluna toracolombossacra.Baixo: Auxílio no tratamento de patologias da coluna lombossacra.





COLETE PUTTI MAX

OR1063 - COLETE PUTTI MAX BAIXO

OR1064 - COLETE PUTTI MAX ALTO

- Novo plush com maior aderência e que não desfia com o uso.
- Talas de alta qualidade em alumínio leve, resistente e moldável.
- As talas podem ser ajustadas à curvatura lombar ou permanecerem retas, conforme a prescrição médica.
- Suas talas mantêm a coluna vertebral alinhada, permitindo uma posição cômoda e funcional.



61



Colete Putti Comfort Air®

OR1460 Estreito | O1461 Largo

São 6 talas de alumínio moldável que limitam os movimentos de extensão, flexão e de rotação e flexão lateral do tronco, proporcionando a estabilização da coluna toracolombossacra posicionadas estrategicamente para maior conforto na região vertebral.

Possui uma chapa de plástico semi rígido (polipropileno) nas costas que vai do início da região sacral até o fim da cervical e mais duas chapas sobrepostas no abdômen que também servem para sustentação e auxílio na hora de vestir o produto.

A parte posterior do colete é confeccionada de tecido respirável e sem elasticidade favorecendo a estabilização. Já a parte da frente é de neoprene, que possui propriedades elásticas facilitando a expansão do abdômen durante a respiração. As faixas elásticas proporcionam tração extra que intensificam a compressão do produto.

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210029

Circunferência Abdominal Altura Recomendada do Usuário DE 1,52 A 1,69CM DE 65 A 80CM DE 78 A 105CM DE 65 A 95CM DE 88 A 110CM DE 1,69 A 1,80CM DE 88 A 110CM DE 80 A 100CM DE 98 A 125CM



SUPPORT



Corretor Postural

MODEL





Circunferência Abdominal

1	Altura Recomendada do Usuário	2	Estreito	Largo
P	DE 1,52 A 1,69CM	-	DE 65 A 80CM	DE 78 A 105CM
М	DE 1,69 A 1,80CM	-	DE 65 A 95CM	DE 88 A 110CM
G	DE 1,79 A 1,95CM	-	DE 80 A 100CM	DE 98 A 125CM

TABELA DE MEDIDAS





P	М	G
DE 65 A 74CM	DE 75 A 85CM	DE 86 A 92CM
GG	XGG	
DE 93 A 105CM	DE 106 A 115CM	

Circunferência cintura (acima umbigo)



Corretor Lean - Circunferência do tórax

Corretor Postural Lean

PP	Р	М
DE 60 A 74CM	DE 75 A 90CM	DE 91 A 105CM
G	GG	
DE 106 A 115CM	DE 116 A 130CM	

	CORRETOR POSTURAL SUPPORT	CORRETOR POSTURAL MODEL	CORRETOR POSTURAL BOOST	CORRETOR POSTURAL LEAN
NÍVEL	4	3	2	2
INDICAÇÕES GERAIS	•	Ø	Ø	②
CONTRATURAS, CONTUSÕES E DISTENSÕES	•	Ø	•	-
LOMBALGIA	•	Ø	-	-
REDUÇÃO DE MEDIDAS NA REGIÃO DA CINTURA	-	Ø	-	-
PREVENÇÃO DE LESÕES POR SOBRECARGA Lombar	•	-	-	-
HÉRNIA DE DISCO	Ø	-	-	-
AUXÍLIO NO TRATAMENTO DA ESCOLIOSE	•	-	-	-



Corretor Postural

MODEL

OR1456 Estreito | OR1457 Largo

O Corretor Postural Model modela a circunferência abdominal enquanto corrige a postura. A chapa de PVC posicionada entre as escápulas trabalha com as fitas tracionando os ombros a ponto de corrigir a postura durante o uso do produto.

A Cinta Abdominal em neoprene modela a cintura e auxilia na circulação e possui também duas faixas elásticas que intensificam a compressão na região. Para ajustar o produto, o Corretor Postural Model possui dois bolsos na frente que facilitam o processo para o usuário conseguir vesti-lo sozinho.

Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves



Corretor Postural

SUPPORT

OR1454 Estreito | OR1455 Largo


O Corretor Postural Support oferece sustentação na região lombar enquanto traciona os ombros para a correção da postura. A chapa de PVC posicionada entre as escápulas trabalha com as fitas tracionando os ombros a ponto de corrigir a postura durante o uso do produto.

A faixa lombar/abdominal é em neoprene, que é um isolante térmico, auxiliando a circulação e alívio da dor. Possui também duas faixas elásticas que intensificam a compressão na região. Na coluna lombar possui 6 hastes flexíveis que promovem sustentação.Para ajustar o produto, o Corretor Postural Support possui dois bolsos na frente que facilitam o processo para o usuário conseguir vesti-lo sozinho.

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório





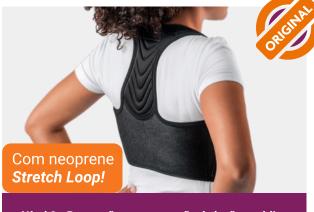

Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1452

Corretor Postural Boost

Pensado especialmente para o corpo feminino, auxilia na manutenção da coluna através da chapa de PVC entre as escápulas e das faixas de tração, e ainda promove a sustentação do busto, oferecendo mais segurança e também conforto.

Tamanhos











Cadastro ANVISA: 80758210025



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1450

Corretor Postural Lean

O mais discreto da linha, possui design anatômico e moderno, oferece compressão e isolamento térmico enquanto auxilia na manutenção da postura através da chapa de PVC entre as escápulas e das faixas de tração com fechamento aderente.

Tamanhos













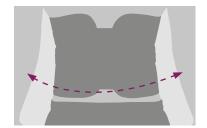


TABELA DE MEDIDAS



Cinta Lombar com Hastes de Aço Flexíveis (Circunferência abdominal miníma e máxima.)

ÚNICO	60 A 100CM
ESPECIAL	101 A 130CM




Cinta High Tech Comfort Air (Circunferência abdominal miníma e máxima.)

P	DE 61 A 80CM
М	DE 81 A 105CM
G	DE 106 A 135CM



Cinta Abdominal (Comprimento x altura da peça aberta.)

OR48	100 X 20CM
OR48B	130 X 25CM
OR48D	130 X 30CM

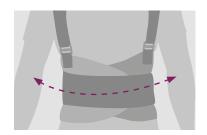


Cinta ergonômica com suspensório (Circunferência abdominal)

P	DE 60 A 100CM
М	DE 80 A 120CM
G	DE 90 A 140CM

	CINTA ERGONÔMICA COM SUSPENSÓRIO	CINTA LOMBAR COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS	CINTA HIGH TECH	CINTA Abdominal
NÍVEL	3	3	3	1
INDICAÇÕES GERAIS	•	•	•	•
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	•	•	•	•
AUXÍLIO NA CORREÇÃO POSTURAL	•	•	•	-
PREVENÇÃO DE LESÕES DURANTE ATIVIDADE FÍSICA E/ OU LABORAL	•	•	•	-
PREVENÇÃO DE LESÕES POR SOBRECARGA LOMBAR	•	•	•	-
HÉRNIA DE DISCO	•	•	•	-
CONTRATURAS, CONTUSÕES E DISTENSÕES	•	•	-	•
SUSPENSÓRIOS EM ELÁSTICO	•	-	-	-



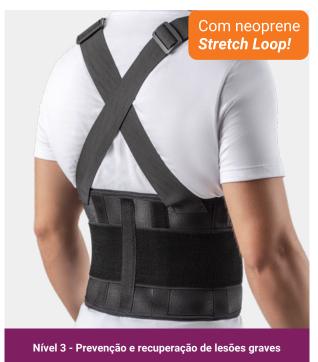

OR1041

Cinta ergonômica com suspensório

A Cinta Ergonômica com Suspensório Hidrolight proporciona suporte e compressão na região lombar. Possui 5 hastes de aço flexíveis que se moldam ao formato do corpo e auxiliam na correção postural. Suas abas elásticas intensificam a compressão e o ajuste, aumentando o conforto, estabilidade e a proteção. Seus suspensórios em elástico de qualidade são ajustáveis e confortáveis. Confeccionada em neoprene, retém o calor do corpo, estimulando a circulação sanguínea e aliviando a dor.

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210022



OR72

Cinta Lombar com Hastes de Aço Flexíveis

Muito confortável, possui 5 hastes flexíveis na região lombar que auxilia a estabilidade, proporcionando mais segurança e muito mais conforto, aliviando as dores da região por sobrecarga. Proporciona reforço da compressão através das faixas elásticas, que auxiliam no relaxamento muscular. Por ser em neoprene melhora a circulação sanguínea.

Tamanhos

ÚNICO







CINTA HIGH-TECH

Comfort Air®

OR1040

Confeccionada em material de alta qualidade, permite que a pele do usuário respire, oferecendo assim maior conforto térmico. Seu maior diferencial são suas hastes rígidas posteriores que podem ter sua compressão ajustada através dos cordões controlados por puxadores laterais que se prendem na frente do produto.

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210022



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR48

Cinta Abdominal

Oferece compressão na região do abdômen especialmente no pós-cirúrgico, proporcionando mais segurança ao usuário. Por ser em neoprene, melhora a circulação sanguínea auxiliando no alívio da dor.

Tamanhos Comprimento x Altura

OR48 - 100CM X 20CM

OR48B - 130CM X 25CM

OR48D - 130CM X 30CM

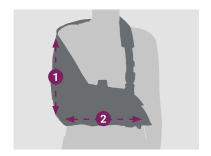


TABELA DE MEDIDAS





PP	DE 26 A 31CM
Р	DE 31 A 34CM
М	DE 34 A 37CM
G	DE 37 A 41CM
GG	DE 41 A 43CM





Р	1 - 28CM	2 - 31CM
М	1 - 30CM	2 - 34CM
G	1 - 32CM	2 - 36CM





P	31CM		
М	34CM		
G	зесм		
Medidas da peça.			

Tipoias

A Linha de Tipoias mais inteligente que permite a regulagem em qualquer um dos braços, direito ou esquerdo, sem precisar virar do avesso ou fazer manobras, basta mudar de braço.

LANÇAMENTO!

TIPOIA DE ABDUÇÃO

OR1014

A tipoia de abdução é utilizada para posicionar, estabilizar e sustentar o membro superior. Indicada para o pós-operatório e para patologias que exigem o posicionamento do membro em abdução. O tempo de uso deve ser determinado conforme avaliação e indicação médica.











TIPOIA ORIONO VELPEAU Air Flox

Desenvolvida para melhorar o conforto térmico do usuário, devido ao uso do tecido respirável. A Tipoia Velpeau Air conta ainda com o ajuste em tiras LOOP TAPE, que facilita o ajuste do produto e dá uma maior amplitude na regulagem.







DA METADE DO DEDO MÍNIMO ATÉ O COTOVELO			
	PP	DE 26 A 31CM	
	Р	DE 31 A 34 CM	
	М	DE 34 A 37 CM	
 	G	DE 37 A 41 CM	
	GG	DE 41 A 43 CM	









OR1001A | Preta

Tipoia Estofada Imobilizadora Velpeau

Confortável e moderna, é confeccionada com uma espuma de 6mm revestida com tecido em algodão dublado, o que proporciona mais conforto. A área de abrangência do membro é maior, trazendo mais segurança ao usuário durante a recuperação. Suas costuras são anatômicas, acompanhando as linhas do corpo. Possui duas opções de fixação no punho, para que o usuário não fique com a mão caída. Os dois botões na parte superior do bolso ajudam a envolver o antebraço proporcionando mais estabilidade ao membro. A fita que sustenta a tipóia é envolvida com uma suave espuma, evitando o atrito do tecido com a pele. E ainda possui duas opções de cores, o clássico azul marinho e o preto, ainda mais discreto e elegante. E claro, não precisa virar do avesso para mudar o braço.

Tamanhos












Cadastro ANVISA: 80758210004

Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.

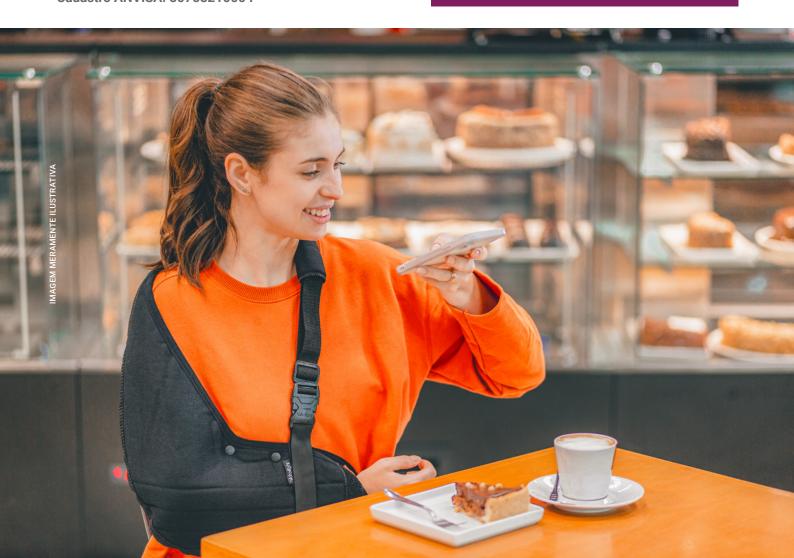



OR1003B

Tipoia Imobilizadora **Velpeau Infantil**

Confortável e moderna, é confeccionada com uma espuma de 6mm revestida com tecido em algodão dublado, o que proporciona mais conforto. A área de abrangência do membro é maior, trazendo mais segurança durante a recuperação. Suas costuras são anatômicas, acompanhando as linhas do corpo. Possui duas opções de fixação no punho, para que o usuário não fique com a mão caída. Os dois botões na parte superior do bolso ajudam a envolver o antebraço proporcionando mais estabilidade ao membro. A fita que sustenta a tipóia é envolvida com uma suave espuma, evitando o atrito do tecido com a pele. E ainda possui duas opções de cores, o clássico azul marinho e o preto, ainda mais discreto e elegante. E claro, não precisa virar do avesso para mudar o braço.

Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210004



OR1003 - Dinossauro | OR1003a - Fundo do mar

Tipoia Imobilizadora Infantil

Com estampa divertida e colorida, oferece mais leveza e conforto à criança durante o difícil período de recuperação da lesão.

> Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.

Tamanhos








Pós-Operatórios

Produtos destinados a prevenir e proteger pacientes ou pessoas com mobilidade reduzida de novas lesões.

Esses itens são desenvolvidos para promover a cura, prevenir infecções e proporcionar conforto durante o processo de recuperação.




TABELA DE MEDIDAS

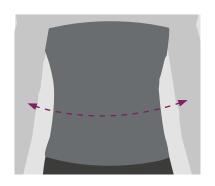




	Circunferência Abdominal	
G/GG	DE 90 A 140CM	
XGG	DE 130 A 170CM	
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 37,5CM	

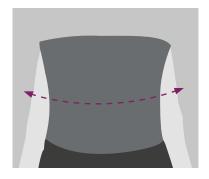


Faixa Elástica de 4 Painéis Pós-Cirúrgica

P/M	DE 60 A 100CM
G/GG	DE 90 A 140CM
XGG	DE 130 A 170CM
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 30CM

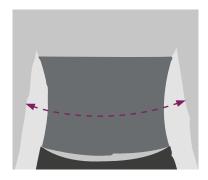

Faixa Elástica de 3 Painéis Pós-Cirúrgica

P/M	DE 60 A 100CM
G/GG	DE 90 A 140CM
XGG	DE 130 A 170CM
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 22,5CM

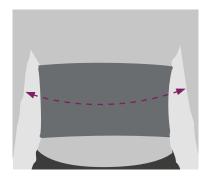

Faixa Elástica de 2 Painéis Pós-Cirúrgica

P/M	DE 60 A 100CM
G/GG	DE 90 A 140CM
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 15CM

Indicações Gerais

Pós-operatório de lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgia bariátrica (redução de estômago), hérnias, pós-parto, fraturas, contusões, apoio compressivo, estabilização da região lombar, entre outras.

Este produto não tem finalidade estética.

Dê preferência para o tamanho que seu médico indicou.





OR1408

Faixa Elástica de 5 Painéis Pós-Cirúrgica

Tamanhos





Cadastro ANVISA: 80758210024



OR1407

Faixa Elástica de 4 Painéis Pós-Cirúrgica

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210024

Este produto não tem finalidade estética.

Dê preferência para o tamanho que seu médico indicou.



OR1406

Faixa Elástica de 3 Painéis Pós-Cirúrgica

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210024



OR1405

Faixa Elástica de 2 Painéis Pós-Cirúrgica


Tamanhos








TABELA DE MEDIDAS

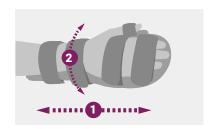

SAFE AIR Tala rígida para mão e antebraço


,	1 - ALTURA 34CM
ÚNICO	2 - CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO 12 ATÉ 28CM

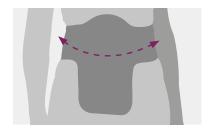

Suporte Ostolight

Circunferência da cintura


P	DE 66CM ATÉ 80CM
М	DE 80CM ATÉ 115CM
G	DE 115CM ATÉ 136CM

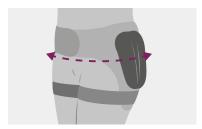

Protetor Externo para Quadris

Circunferência do quadril

ÚNICO	DE 80 ATÉ 120CM

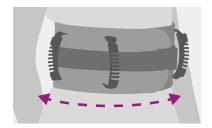

Cinto de Transferência

Circunferência da cintura

ÚNICO	DE 80 ATÉ 120CM



1	LARGURA 20CM
2	COMPRIMENTO SEM ALÇAS 58CM
3	COMPRIMENTO TOTAL 90CM



Órtese - OR1051



Desenvolvido para proporcionar conforto aos pacientes que precisam imobilizar o antebraço e a mão após um Acidente Vascular Encefálico (AVE) que causou espasticidade. A base rígida pode ser removida facilmente para limpeza e não possui componentes metálicos, tornando-o lavável e mais durável.

Tamanhos

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210036





Osto Light

Desenvolvido para proporcionar leveza e praticidade para o dia a dia de pessoas ostomizadas que necessitam da bolsa. Os bolsos frontais com fecho facilitam a higienização da bolsa. Já os bolsos laterais com fecho oferecem praticidade para transportar pequenos objetos, como lanches, chaves, dinheiro ou celular, tanto nas atividades diárias quanto durante a prática de exercícios físicos.

Tamanhos








OR1602

FAIXA ELÁSTICA PARA COLOSTOMIA

Desenvolvido para o pós-operatório de cirurgias de ostomia que necessitam o uso de bolsa. A faixa de painéis faz a compressão segura das suturas e o orifício que dá acesso ao estoma, onde é fixada a bolsa coletora (não acompanha). Por ser dividida em painéis, ela articula e se ajusta aos movimentos, como o de sentar e levantar por exemplo. Acompanhando a faixa, uma bolsa externa de sustentação com zíper e uma faixa compressiva que diminui o volume da bolsa, deixam todo o conjunto mais discreto e seguro.



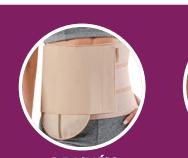






4 PAINÉIS



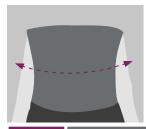

P/M	DE 60 A 100CM
G/GG	DE 90 A 140CM
XGG	DE 130 A 170CM

3 PAINÉIS ALTURA

EM TODOS OS TAMANHOS 22,5CM

4 PAINÉIS ALTURA

EM TODOS OS TAMANHOS 30CM



OR1047

Suporte Genital Masculino

Fácil ajuste na cintura e suporte (bolsa) com tecido confortável.

Indicado para reduzir a tensão da bolsa escrotal; Alívio de dores testiculares; Hérnia; Vasectomia; Contusões; Varicocele; Pós-operatório.

Cadastro ANVISA: 80758210041


		circunferência da cintura 70CM ATÉ 130CM
	0	1 - CIRCUNFERÊNCIA DA BOLSA
Р		24 CM
М		28 CM
G		32 CM
GG		34 CM



OR1046

Cinta para Hérnia Umbilical

A Cinta para Hérnia Umbilical é destinada para a compressão de hérnias umbilicais, confeccionada com materiais de excelente qualidade, oferece resistência, compressão, fácil ajuste e fácil higienização.

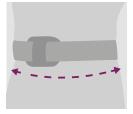

CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA		
ATÉ 70 CM		
ATÉ 100 CM		
ATÉ 130 CM		



Cinta para Hérnia Inguinal

OR1048 - DUPLA

OR1045_B - ESQUERDA

OR1045 - DIREITA

Desenvolvida para proporcionar compressão em hérnia inguinal, confeccionada com materiais de excelente qualidade, fácil ajuste e fácil higienização. Indicada para sustentação da hérnia inguinal, prevenindo seu crescimento. Alívio da dor ou desconforto. Não utilize sem recomendação médica, pois pode causar efeitos adversos graves. Consulte um especialista.



CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA		
Р	ATÉ 70 CM	
М	ATÉ 100 CM	
G	ATÉ 130 CM	







PROTETOR EXTERNO PARA QUADRIS • or88

Desenvolvido para oferecer mais segurança durante a movimentação do dia a dia de pessoas com mobilidade e equilibrio reduzidos, prevenindo ou minimizando a gravidade de fratura nos quadris do paciente/usuário em caso de queda.

Tamanhos

ÚNICO





CINTO DE TRANSFERÊNCIA 0R85

Desenvolvido para facilitar a transferência do paciente entre a cama, poltrona, cadeira de rodas, carro e onde for necessário.

Proporciona maior segurança e conforto nos deslocamentos, tanto para o paciente quanto para o cuidador.

Tamanhos

Limite de Peso

ÚNICO

120KG



CINTO DE MANOBRA

Desenvolvido para auxiliar cuidadores na movimentação e posicionamento de pacientes acamados.

Seu tecido é resistente e seus 4 pegadores em TPE facilitam a manobra de forma segura e muito mais confortável.

Tamanhos

Limite de Peso

ÚNICO

120KG





Knit Wave


Afamilía Ortho Recovery é confeccionada com o tecido 3D respirável, um tecido que não eleva a temperatura local e mantém suor afastado da pele, proporcionando mais conforto durante o uso.

Comastécnicas de malharia retilínea para criar uma configuração tridimensional, o tecido elástico torna possível diferentes níveis de compressão em uma mesma peça dando assim mais liberdade de movimento e zonas de compressão diferenciadas, mais compressão onde a articulação precisa.

E essa tecnologia demos o nome de Knit Wave Technology, onde combina todo esse processo de compressão personalizada com elementos de termorregulação corporal. Nos pontos de maior atrito ou pressão, o silicone interno protege e massageia a área mais afetada da articulação.



TABELA DE MEDIDAS

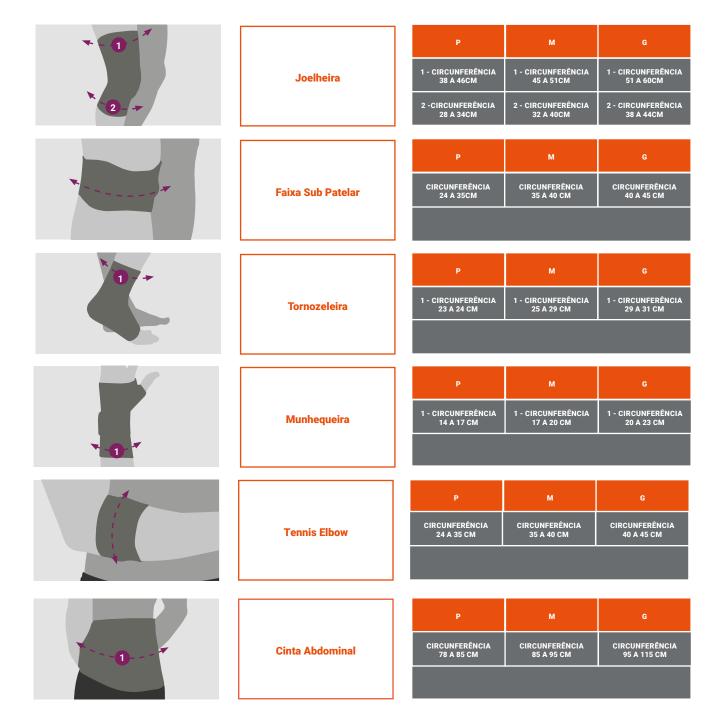



Joelheira Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, contusões, edemas, distensões, tendinites, bursites, instabilidade patelar, síndrome de dor patelofemoral, pré e pós-operatório, auxilio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210027



RV03

Faixa Sub Patelar Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, contusões, edemas, distensões, tendinites, bursites, Síndrome de Osgood Schlatter, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos













Tornozeleira Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, entorses, contusões, edemas, distensões, bursites, tendinites, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos









Munhequeira Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, bursites, tendinites, L.E.R. (lesões por esforços repetitivos) e D.O.R.T. (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), pré e pós-operatório, auxílio no tratamento fisioterapêutico.


Tamanhos







Cadastro ANVISA: 80758210027

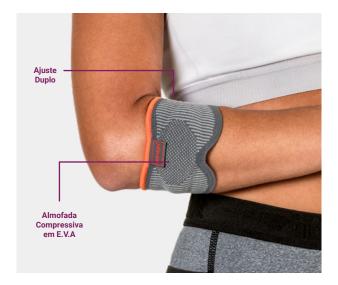

Tennis Elbow Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, epicondilites, tendinites, L.E.R. (lesão por esforço repetitivo) e D.O.R.T. (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos













Cinta Lombar Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, correção postural, alívio de dores agudas e crônicas, pré e pós-operatório, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos












Protetor para Punho ELÁSTICO

EL18 Estreito | EL17 Largo

Feito com material elástico regulável com fechamento em velcro, o Protetor para Punho Elástico proporciona maior compressão e firmeza, diminui o risco de lesões e entorses, oferece maior segurança e proteção, imobiliza os movimentos, além de auxiliar na recuperação de lesões no punho.

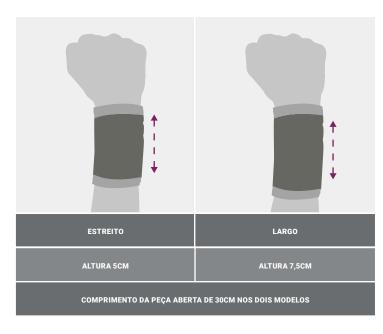













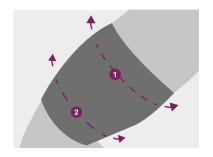

Coxal Elástic	CO
Bamboo	

Р	М	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA	1 - CIRCUNFERÊNCIA	1 - CIRCUNFERÊNCIA
COXA - 29CM	COXA - 32CM	COXA - 36CM
2 - CIRCUNFERÊNCIA	2 - CIRCUNFERÊNCIA	2 - CIRCUNFERÊNCIA
COXA - 22CM	COXA - 26CM	COXA - 31CM

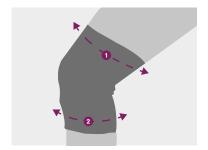



P	М	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA	1 - CIRCUNFERÊNCIA	1 - CIRCUNFERÊNCIA
COXA - 29CM	COXA - 30CM	COXA - 34CM
2 - CIRCUNFERÊNCIA	2 - CIRCUNFERÊNCIA	2 - CIRCUNFERÊNCIA
CANELA - 21CM	CANELA - 23CM	CANELA - 24CM




Tornozeleira Elástico Bamboo

P	М	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA	1 - CIRCUNFERÊNCIA	1 - CIRCUNFERÊNCIA
CANELA - 15CM	CANELA - 18CM	CANELA - 19CM
2 - CIRCUNFERÊNCIA	2 - CIRCUNFERÊNCIA	2 - CIRCUNFERÊNCIA
PÉ - 14CM	PÉ - 16CM	PÉ - 17CM

*Todas as medidas são do tecido em repouso, podendo haver variação.

Indicações Gerais

Para prevenir lesões com um tecido leve e confortável, a Linha Elastic é uma ótima opção, oferecendo mais estabilidade durante a prática esportiva sem limitar os movimentos. Os produtos Bamboo ainda possuem fibras antibacterianas diminuindo o odor da peça após o uso.

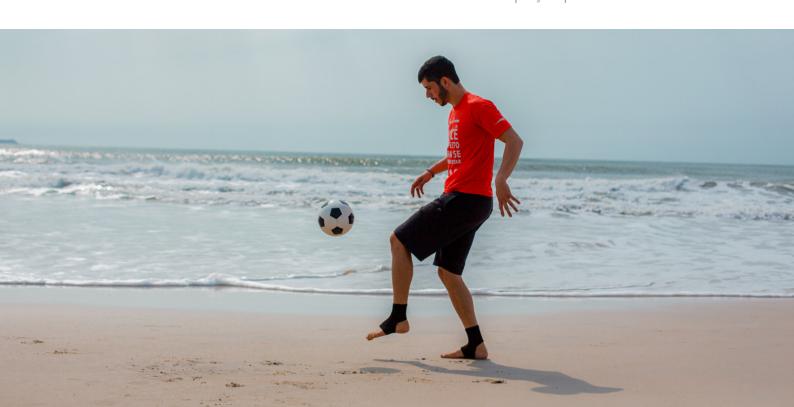



EL13

Coxal Elástico Bamboo

Tamanhos









EL09

Joelheira Elástica Bamboo

Tamanhos









EL11


Tornozeleira Elástica Bamboo

Tamanhos







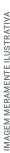



EL12

Coxal Elástico Bamboo

Tamanhos









EL08

Joelheira Elástica Bamboo

Tamanhos









EL10

Tornozeleira Elástica Bamboo

Tamanhos











CATÁLOGO ORTOPEDIA



A vida em Movimento.













